


Dobíjacia sonická zubná kefka

Návod na použitie

Model: GTS 2066

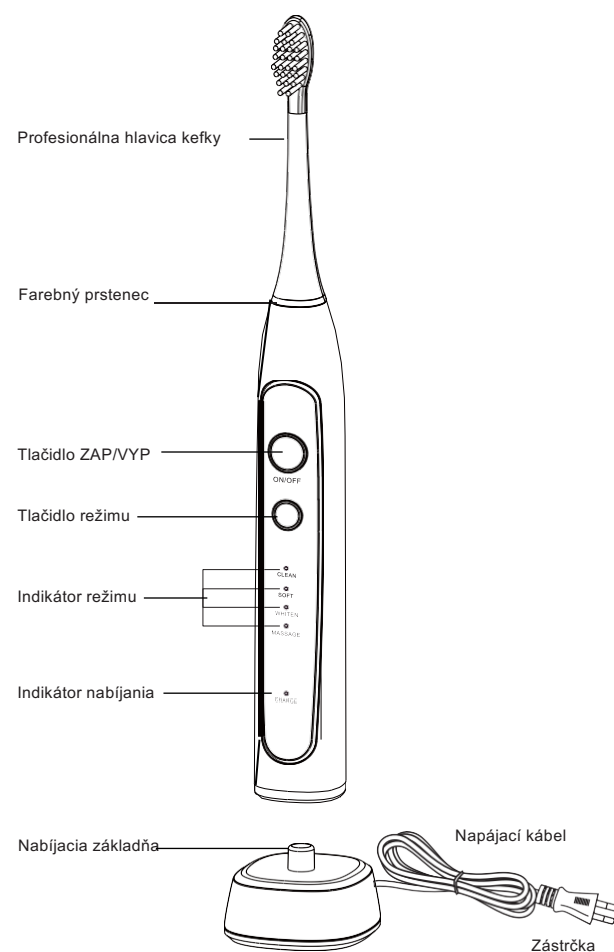

PRED POUŽITÍM PREŠTUDUJTE VŠETKY POKYNY

-1-

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Zubná kefka Power je bezpečná a účinná, ak je používaná podľa pokynov. Rovnako ako pri všetkých iných elektrických spotrebičoch je však nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, predovšetkým v prítomnosti detí.

RIZIKÁ – VODA

Aby ste znížili riziko vzniku popálenín, zabitia elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

- Nabíjacie základňu neumiestňujte ani neuchovávajte v miestach, kde môže byť stiahnutá do vane, umývadla alebo toalety.
- Nabíjačku neumiestňujte ani ju nepúšťajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Pre výrobok nesiahajte, ak spadol do vody alebo inej kvapaliny. Ihneď ho odpojte od prívodu elektrickej energie.
- Nepoužívajte pri kúpaní.
- Nabíjaciu základňu pred čistením odpojte zo zásuvky a presvedčte sa, že je pred pripojením do elektrickej zásuvky suchá.

RIZIKÁ – NAPÄTIE

Aby ste znížili riziko vzniku popálenín, zabitia elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

- Nezapájajte nabíjaciu základňu do zásuvky s napätím iným než uvedeným na spodnej časti základne.
- Tento výrobok je určený na prevádzku v rozpätí 100 až 240 V.
- Meniče napätia nezaručujú kompatibilitu.
- Zástrčku nezasuňte do zásuvky silou.
- Ak sa zástrčka ľahko do zásuvky nezasuňuje, nepoužívajte ju.

RIZIKÁ – VAROVANIE

Aby ste znížili riziko vzniku popálenín, zabitia elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo osobami neznalými a neskúsenými, ak nie sú pod adekvátnym dohľadom dospelého osoby zodpovednej za ich zdravie alebo touto osobou neboli poučené o použití tohto výrobku.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Tento výrobok používajte len na jeho zamýšľaný účel, ako je opísané v tomto návode. Tento výrobok je určený len na čistenie zubov, ďasien a jazyka.
- Nepoužívajte nadstavce alebo hlavice na kefku iné než odporúčané výrobcom.
- Zubná kefka je určená na osobnú starostlivosť, nie na použitie viacerými pacientmi v lekárskej ordinácii či inštitúcii.
- Ak vaša zubná pasta obsahuje peroxid, jednu sódu alebo iný bikarbonát (bežný v bieliacich pastách), hlavice a rukoväť kefky vždy dôkladne očistite, aby nedošlo k popraskaniu plastových častí.
- Tento výrobok nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel, zástrčku alebo nabíjaciu základňu.
- Tento výrobok nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, bol poškodený alebo pustený do vody. Výrobok prestaňte ihneď používať, ak bude javiť akékoľvek známky poškodenia.
- Zubnú kefku, nabíjaciu základňu a napájací kábel uchovávajte mimo dosah vykurovaných povrchov.
- Ak budete pri umývaní zubov pociťovať nepohodlie alebo bolesť, prestaňte tento výrobok používať alebo kontaktujte svojho zubného lekára.
- Batériu nevyberajte.
- Zubnú kefku nečistite v umývačke riadu.
- Tento prístroj má polarizovanú zástrčku (jeden kontakt je širší ako druhý). Preto je možné zástrčku z dôvodu bezpečnosti zasunúť do polarizovanej zásuvky len jedným spôsobom.
- Ak zástrčka v zásuvke nesedí, otočte ju. Ak stále nesedí, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika. Tento bezpečnostný prvok sa nesnaží nijak obísť.
- Nepoužívajte vonku alebo tam, kde sú používané aerosólové výrobky (spreje), alebo kde sa podáva kyslík.

-2-

- Zubné kefky môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo osoby neznalé a neskúsené, ak sú pod dohľadom dospelého osoby alebo boli touto osobou poučené o bezpečnom použití tohto prístroja a rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním. Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Pred likvidáciou prístroja z neho musí byť odstránená batéria.
- Pri odstraňovaní batérie musí byť prístroj odpojený od prívodu elektrickej energie.
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca či podobne kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyvarovali riziku.
- Čistenie povrchov kefiek prichádzajúcich do styku s rukou a pokožkou je uvedené v časti <ÚDRŽBA>.

ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIA

- Ak ste v posledných dvoch mesiacoch podstúpili chirurgický zásah v dutine ústnej alebo operáciu ďasien, pred použitím výrobku kontaktujte svojho zubného lekára.
- Ak dôjde pri použití tohto výrobku k nadmernému krvácaniu alebo drobné krvácanie pokračuje ešte po týždni používania, kontaktujte svojho zubného lekára.
- Pred použitím tohto výrobku kontaktujte svojho praktického lekára alebo výrobcu implantátu, ak máte otázky týkajúce sa kombinovaného použitia tohto výrobku s kardiostimulátorom alebo iným implantovaným zdravotníckym prostriedkom (implantovanými zdravotníckymi prostriedkami).
- Ak máte pred použitím zubnej kefy akékoľvek otázky týkajúce sa zdravia, kontaktujte svojho praktického lekára.
- Zubná kefka bola testovaná a je certifikovaná v súlade s nariadeniami ETL a CE.
- Po použití tento výrobok vždy odpojte od zdroja napájania.
- Nikdy ho nepoužívajte v spánku alebo ak ste ospalí.

USCHOVAJTE TIETO INŠTRUKCIE

-3-



ZAČÍNAME

Nabíjanie kefky

Pred nabíjaním kefku vypnite. Zástrčku zasunúť do zásuvky. Rukoväť umiestnite do nabíjačky. Indikátor nabíjania sa rozsvieti a označí prebiehajúce nabíjanie. Po úplnom nabití batérie sa farba indikátora nabíjania zmení na trvalo svietiacu zelenú a označí tak úplné nabitie kefky.


Poznámky:

- Úplné nabitie kefky trvá aspoň 24 hodín.
- Zubná kefka musí byť nabíjaná 24 hodín, ak:
 - sa jedná o prvé použitie kefky,
 - kefka nebola používaná dlhšie ako tri mesiace.
- Abý batéria zostala plne nabitá, odporúčame, aby ste kefku nechali v nabíjačke, keď nie je používaná.
- Počas nabíjania sa kefka zahreje, čo je normálne.
- Doba prevádzky sa pri zostatku batérie skráti. Ak zubná kefka pracuje len jednu krátku dobu po úplnom nabití, znamená to, že je batéria na konci svojej životnosti. Požiadajte servisné centrum o radu.

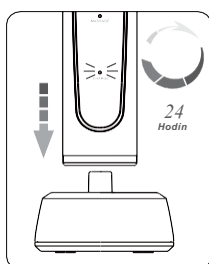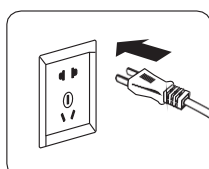


POUŽITIE


- Zasuňte hlavice kefky do rukoväte. Hlavice kefky zatlačte smerom nadol, pokiaľ nezapadne na miesto v rukoväti. Poznámka: Medzi farebným prstencom a rukoväťou je malá medzera. (Obr. 1)
- Namočte štetinky kefky a naneste malé množstvo zubnej pasty.
- Štetinky umiestnite proti zubom v miernom uhle smerom k línií ďasien. (Obr. 2)
- Pre výber režimu stlačte tlačidlo režimu. Ak viete, aký režim ste naposledy používali, nemusíte ho znovu meniť. Kefka je vybavená 4 režimami.
 - ČISTENIE:** Štandardný režim pre perfektné čistenie zubov.
 - SOFT:** jemná starostlivosť pre citlivé zuby.
 - BIELENIE:** Čistenie zubov s leštením a bielením.
 - MASÍROVANIE:** Pulzácia s miernou stimuláciou ďasien.

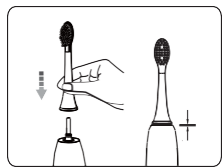

Obr. 1

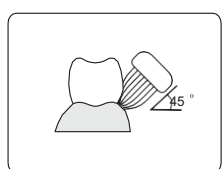

Obr. 2

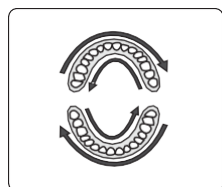


Obr. 3

Poznámky:
Ak počas čistenia stlačíte tlačidlo režimu, kefka prejde na ďalší režim, spustí ďalší 2 minútový cyklus a rozsvieti sa indikátor režimu.

-4-

- Vyvíjajte mierny tlak a jemne pohybujte hlavice kefky cez zuby v opakovanom pohybe smerom dopredu a dozadu.
- Aby ste maximalizovali účinok čistenia, rozdeľte si ústa na 4 časti. Začnite prvou časťou a každú časť čistíte približne 30 sekúnd. Kefka pri čistení zastaví medzi každým 30 sekundovým intervalom a označí tak, kedy je potrebné prejsť na ďalšiu časť.
- Zubná kefka sa automaticky zastaví po 2 minútach používania. (Obr. 3)
- Odpojte hlavice kefky. (Obr. 4)
- Hlavice aj rukoväť opláchnite pod tečúcou vodou a utrite ich dosucha. (Obr. 5)

Rukoväť vráťte späť do nabíjačky.

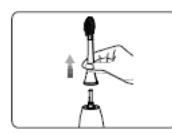

Obr. 4




Obr. 5

ÚDRŽBA

Pred čistením výrobky vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Kefka

- Zložte hlavice kefky.
- Všetky povrchy utrite vlhkou handričkou a rukoväť vráťte naspäť do nabíjačky. Rukoväť neponárajte do vody.
- Hlavice kefky a štetinky opláchnite vodou po každom použití.
- Neumývajte ich v umývačke na riad.==

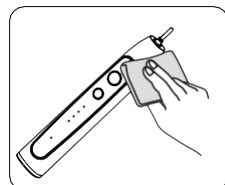

Nabíjačka

- Pomocou mäkkej handričky utrite všetky nečistoty z nabíjačky a miesta uloženia.
- Zástrčku pravidelne čistite, aby zostala v dobrom prevádzkovom stave. Prach alebo nečistoty nahromadené na zástrčke môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, prehriatie alebo požiar.

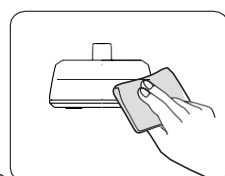

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Kefka nefunguje.	Práve ste výrobok zakúpili alebo ste ho nepoužívali dlhšie než 3 mesiace	Nabíjajte hlavnú jednotku aspoň 24 hodín.
Slabé alebo znížené vibrácie.	Zubná kefka je silno zatlačená na zuby.	Kefka sa má o zuby mierne opierať.
Kefka pracuje len veľmi krátku dobu dokonca aj po nabití.	Batéria dosiahla koniec životnosti. Doba nabíjania nebola dostatočná.	Požiadajte servisné centrum Nabíjajte hlavnú jednotku aspoň 24 hodín.

LIKVIDÁCIA





Napájacím zdrojom je lithium-iónová batéria, ktorú je možné recyklovať. Na konci životnosti výrobku pred jeho likvidáciou vždy vyberte batériu a recyklujte ju alebo ju zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na zaobchádzanie s odpadmi. Ak máte otázky týkajúce sa recyklácie, kontaktujte miestny úrad pre zaobchádzanie s odpadmi.

Vybratie a recyklácia batérie

Výrobok nerozoberajte inokedy, než pri jeho likvidácii. Ak to vykonáte skôr, výrobok zničíte. Dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Pri odstraňovaní batérie musí byť prístroj odpojený od prívodu elektrickej energie.

- Pre vyňatie batérie sa uistite, že je jednotka úplne vybitá.
- Pomocou skrutkovača zložte kryt skrutky a kryt batérie.
- Rukoväť podržte hore nohami, stlačte hriadeľ zubnej kefky a vyberte dva háčiky, aby ste uvoľnili vnútorné súčasti rukoväte.
- Zasuňte skrutkovač vedľa pripojenia batérie a skrutkovačom otočte, aby ste toto spojenie prerušili. Odstráňte obvodovú dosku a vyberte batériu z plastového nosiča.
- Batériu správne recyklujte alebo zlikvidujte. Na miestnom úrade pre zaobchádzanie s odpadmi zistite, či na recykláciu prijmu aj zostávajúce súčasti zubnej kefky.

Dbajte na to, aby ste nevyškrotili záporný a kladný pól batérie. Prístroj po vybratí batérie nepripájajte k sieti.

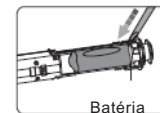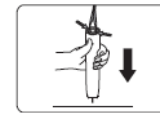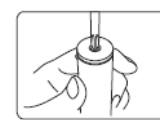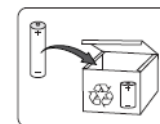

Batéria



Dr. Mayer
Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com
Web: www.doctor-mayer.com

-5-

-6-