

# beurer

## HK 55 Easyfix

SK



### SK Vyhrievacie vankúše Návod na obsluhu

## Vysvetlenie symbolov na štítku



Prečítajte si uvedené upozornenia!



Nepoužívajte poskladané alebo zhrnuté!



Nevpichujte ihly!



Textílie použité pri tomto prístroji spĺňajú vysoké humánno-ekologické požiadavky normy Öko-Tex 100, ako bolo preukázané Skúšobným textilným inštitútom Testex, Zürich.

## Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.

Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje.

So srdečným pozdravom,

Váš tím Beurer

**Rozsah dodávky:** 1 vyhrievací vankúš, 1 prepínač, tento návod na použitie

# 1. Dôležité bezpečnostné upozornenia – dôkladne si ich prečítajte a uschovajte na neskoršie

Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže spôsobiť ublíženie na zdraví alebo vecné škody (zásah elektrickým prúdom, popálenie pokožky, požiar). Nasledujúce bezpečnostné upozornenia a upozornenia na nebezpečenstvo slúžia nielen na ochranu vášho zdravia príp. zdravia tretích osôb, ale aj na ochranu výrobku. Dodržujte preto tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku tretím osobám odovzdajte aj tento návod.

- Používajte túto vyhrievaciu podušku len k účelu, ktorý je opísaný v návode.
- Táto elektrická poduška nie je určená na použitie v nemocniciach.
- Táto vyhrievacia poduška nie je určená na to, aby ju používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, s výnimkou prípadu, ak vyhrievaciu podušku používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nepoužívať pri bezvládných, malých deťoch alebo osobách necitlivých na teplo (napr. diabetikoch, osobách s chorobnými zmenami na pokožke, alebo zjazvenými plochami kože v oblasti použitia, po použití liekov zmiernujúcich bolesť alebo alkoholu).
- Príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleninám pokožky.
- Pozor! V žiadnom prípade nezaspíte, kým je elektrická poduška zapnutá.
- Neprikladajte elektrickú podušku na partie tela, ktoré sú zapálené, poranené alebo napuchnuté. V prípade pochybností si musíte pred použitím vyžiadať lekársku radu.
- Elektrické a magnetické polia, ktoré vychádzajú z tejto vyhrievacej podušky, môžu za určitých okolností rušiť funkciu Vášho kardiostimulátora. Nedosahujú ale hraničné hodnoty: elektrická intenzita poľa: max. 5000 V/m, magnetická intenzita poľa: max. 80 A/m, magnetická hustota toku: max. 0,1 militesla. Informujte sa prosím pred použitím tejto vyhrievacej podušky u Vášho lekára a výrobcu Vášho kardiostimulátora.
- Túto vyhrievaciu podušku – pripájajte len na napätie, ktoré je uvedené na prístroji,

- nenechávajúce bez dozoru,
- nezapájajte poskladanú ani zrolovanú,
- neprichytávajúce štipcami,
- prudko nelámete,
- nepoužívajte pre zvieratá,
- nepoužívajte vo vlhkom stave,
- prevádzkovať len s typom vypínača, ktorý je uvedený na vyhrievacej poduške.
- Elektronické súčiastky v prepínači vyhrievacej podušky spínač pri použití mierne zahrievajú. Spínač preto nesmie byť prikrýty alebo položený na vyhrievacej poduške, keď je zapnutá.
- Nefahajte za vodiče, neotáčajte ich ani ich neprehýbajte v ostrom uhle.
- Do vyhrievacej podušky nezapichujte ihly alebo ostré predmety.
- Túto vyhrievaciu podušku nesmú používať deti, iba ak vypínač bol vopred nastavený jedným z rodičov alebo osobou, ktorá na deti dáva pozor, alebo bolo dieťa dostatočne poučené, ako sa má táto vyhrievacia poduška bezpečne prevádzkovať.
- Dohládajte na deti, aby sa s vyhrievacou poduškou nehrali.
- Túto vyhrievaciu podušku je potrebné po určitom čase často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, že má takéto príznaky, alebo sú poškodené vodiče alebo ak vyhrievacia poduška bola neodborne používaná, musí sa pred opätovným použitím priniesť k výrobcovi alebo predajcovi.
- Opravy môžu vykonávať len odborníci alebo výrobcom uznaná opravárska dielňa, pretože pri oprave sú potrebné špeciálne nástroje. Neodbornými opravami môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo.
- Ak by ste ešte mali otázky k používaniu nášho prístroja, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.

## 2. Účelové použitie

Táto vyhrievacia poduška je určená na ohrev ľudského tela. Môžete ňou teplo aplikovať cielene.

Teplo podporuje prekrvenie a uvoľňuje svalstvo. Táto vyhrievacia poduška nie je určená na použitie v nemocniciach ani na profesionálne využitie. Nesmú ňou byť ohrievané najmä dojčatá, malé deti, osoby bezmocné alebo necitlivé na teplo, ani zvieratá.

Táto vyhrievacia poduška z priedušného velúru je prispôsobivá a príjemná pre pokožku.

Po odpojení spínača sa vyhrievací vankúš môže prať v práčke (pozri údaje o čistení).

Pri prvom použití môže vyhrievacia poduška cítiť umelou hmotou, tento pach sa ale po krátkom čase stratí.

Táto elektrická vyhrievacia poduška je univerzálne použiteľná. Napríklad na bruchu, chrbte, kĺboch alebo šiji. Pre použitie v oblasti šije je podušku možné zvinúť.

Vyťahovateľné konce so suchým zipsom umožňujú ľahké upevnenie podušky na tele. Vďaka sťahovacej gumičke vyhrievacia poduška vždy optimálne sedí.

## 3. Obsluhovanie

### 3.1 Bezpečnosť

Táto vyhrievacia poduška je vybavená BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Elektronická senzorová technika zabraňuje prehriatiu vyhrievacej podušky na celej ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy. Ak sa v prípade poruchy vyhrievacia poduška automaticky vypne prostredníctvom bezpečnostného systému, zobrazenie teplotného stupňa na vypínači nesvieti ani keď je vyhrievacia poduška zapnutá. Dbajte na to, aby sa v prípade poruchy z bezpečnostného dôvodu vyhrievacia poduška už nepoužívala, musí sa zasláť na uvedenú adresu servisu.

### 3.2 Voľba teploty

Najrýchlejší ohrev vyhrievacej podušky dosiahnete, ak najprv nastavíte najvyššiu teplotu. Neskôr

môže byť podľa potreby prepnutá na nižšiu teplotu. Po zapnutí vyhrievacej podušky zobrazenie zvoleného teplotného stupňa krátko zabliká a potom svieti. Pri dlhšie trvajúcim použití vyhrievacej podušky odporúčame použiť najnižší stupeň.

### 3.3 Stupne teploty

Stupeň: 0 vyp

- 1 minimálne teplo
- 2 stredné teplo
- 3 maximálne teplo

### 3.4 Rýchloohrev

Tieto vyhrievacie vankúše disponujú rýchloohrevom, ktorý slúži k rýchlemu nahriatiu počas prvých 10 minút.



### 3.5 Automatické vypnutie

Vyhrievacia poduška sa cca po 90 minútach automaticky vypne. Zobrazenie teplotného stupňa potom začne blikať. Aby sa vyhrievacia poduška znovu zapla, zvolte najprv nastavenie „0“ a až po cca 5 sekundách želaný teplotný stupeň. Pokiaľ sa vyhrievacia poduška po uskutočnenom časovom vypnutí nebude používať, vyhrievaciu podušku vypnite (stupeň „0“) alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



## 4. Čistenie a údržba

**Pred čistením vyhrievacieho vankúša, vždy vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.** Malé nečistoty môžete odstrániť kúskom textilu alebo vlhkou špongiou, príp. aj jemným tekutým pracím prostriedkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Nečistite vyhrievací vankúš chemicky, nežmýkajte ho, nesusťte v sušičke, nemangľujte ho ani nežehlite.

Odpojte pred práním najprv zásuvnú spojku a tým spínač od vyhrievacieho vankúša. Nastavte práčku na šetrné pranie pri 40°C.


Z ekologických dôvodov Vám odporúčame prať vyhrievací vankúš len spolu s inými textíliami.

Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

Uvedomte si, že príliš častým práním je vyhrievací vankúš viac namáhaný. Vyhrievací vankúš by sa mal preto prať v práčke počas celej životnosti max. 10 krát.

Vyhrievací vankúš nepripínajte pri sušení kolíkmi na bielizeň alebo podobnými svorkami a v žiadnom prípade nezapínajte vyhrievací vankúš na sušenie!

**Spínač s vyhrievacím vankúšom znovu spojte až vtedy, keď bude zásuvná spojka a vyhrievací vankúš úplne suchý.**

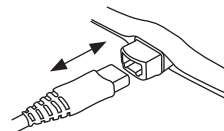

## 5. Skladovanie

Keď dlhší čas vyhrievací vankúš nepoužívate, odporúčame Vám, skladovať ho v originálnom obale v suchom prostredí a nezaťažený.

Elektrickú podušku nechajte najprv vychladnúť.

## 6. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.







