

HK 58 Cosy



HK 115 Cosy



HK 125 XXL



SK Vyhrievacie vankúše Návod na obsluhu



Vysvetlenie symbolov na štítku



A se citi instrucțiunile!



Nepoužívajte poskladané alebo zhrnuté!



Nevpichujte ihly!



Textílie použité na tomto zariadení spĺňajú vysoké požiadavky humánnej ekológie normy Öko-Tex, ako potvrdil Forschungsinstitut Hohenstein.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.


Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje.

So srdečným pozdravom,
Váš tím Beurer

Rozsah dodávky: 1 vyhrievací vankúš, 1 prepínač, 1 poťah, tento návod na použitie

1. Vypínač

1. Vypínač
2. Posuvný spínač (ZAP = I / VYP = 0)
3. Indikácia teplotného stupňa
4. Tlačidlá na nastavenie teploty

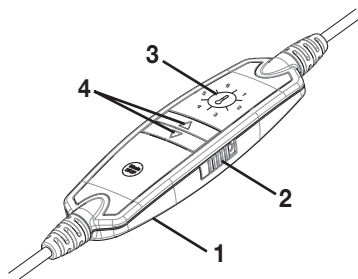

2. Dôležité bezpečnostné upozornenia – dôkladne si ich prečítajte a uschovajte na neskoršie použitie

Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže spôsobiť ublíženie na zdraví alebo vecné škody (zásah elektrickým prúdom, popálenie pokožky, požiar). Nasledujúce bezpečnostné upozornenia a upozornenia na nebezpečenstvo slúžia nielen na ochranu vášho zdravia príp. zdravia tretích osôb, ale aj na ochranu výrobku. Dodržujte preto tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku tretím osobám odovzdajte aj tento návod.

- Túto vyhrievaciu podušku používajte len na účel, ktorý je opísaný v návode.
- Táto vyhrievacia poduška nie je určená na použitie v nemocniciach.

- Táto vyhrievacia poduška nie je určená na to, aby ju používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, s výnimkou prípadu, ak vyhrievaciu podušku používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nepoužívať pri bezvládných, malých deťoch alebo osobách necitlivých na teplo (napr. diabetikoch, osobách s chorobnými zmenami pokožky, alebo zjazvenými plochami pokožky v oblasti použitia, po požití liekov zmiernujúcich bolesť alebo alkoholu).
- Príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleniu pokožky.
- Pozor! V žiadnom prípade nezaspiť, kým je elektrická poduška zapnutá.
- Neprikladajte elektrickú podušku na časti tela, ktoré sú zapálené, poranené alebo napuchnuté. V prípade pochybností si musíte pred použitím vyžiadať lekársku radu.
- Elektrické a magnetické polia, ktoré vychádzajú z tejto vyhrievacej podušky, môžu za určitých okolností rušiť funkciu Vášho kardiostimulátora. Nedosahujú ale hraničné hodnoty: elektrická intenzita poľa: max. 5000 V/m, magnetická intenzita poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 militesla. Informujte sa prosím pred použitím tejto vyhrievacej podušky u Vášho lekára a výrobcu Vášho kardiostimulátora.
- Túto vyhrievaciu podušku
 - pripájajte len na napätie, ktoré je uvedené na prístroji,
 - prevádzkujte len s typom vypínača, ktorý je uvedený na vyhrievacej poduške,
 - nenechávajte bez dozoru,
 - nezapájajte poskladanú ani zrolovanú,
 - neprichytávajte štipcami,
 - neprehýbajte v ostrom uhle,
 - nepoužívajte pre zvieratá,
 - nepoužívajte vo vlhkom stave.
- Elektronické súčiastky vo vypínači vyhrievacej podušky spôsobujú pri použití ľahké zahriatie vypínača. Vypínač preto nesmie zakrytý alebo ležať na zapnutej vyhrievacej poduške.
- Neťahajte za vodiče, neotáčajte ich ani ich neprehýbajte v ostrom uhle.
- Do vyhrievacej podušky nezapichujte ihly alebo ostré predmety.
- Túto vyhrievaciu podušku nesmú používať deti, iba ak bol vypínač vopred nastavený jedným z rodičov alebo osobou, ktorá na deti dáva pozor, alebo bolo dieťa dostatočne poučené, ako sa má táto vyhrievacia poduška bezpečne prevádzkovať.
- Dohliadajte na deti, aby sa s vyhrievacou poduškou nehrali.
- Elektrickú podušku je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, že sa známky opotrebovania vyskytnú alebo ak bola elektrická poduška nesprávne použitá, je potrebné ju pred ďalším použitím doručiť k výrobcovi alebo predajcovi na kontrolu.
- V prípade, že je poškodené elektrické prírodné vedenie tejto elektrickej podušky, musí ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohrozeniu.
- Opravy môžu vykonávať len odborníci alebo výrobcom uznaná opravárska dielňa, pretože pri oprave sú potrebné špeciálne nástroje. Neodbornými opravami môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo.
- Ak by ste ešte mali otázky k používaniu nášho prístroja, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.

3. Účelové použitie

Táto vyhrievacia poduška je určená na ohrev ľudského tela. Môžete ňou teplo aplikovať cieľene. Teplo podporuje prekrvenie a uvoľňuje svalstvo. Táto vyhrievacia poduška nie je určená na použitie v nemocniciach ani na profesionálne využitie. Nesmú ňou byť ohrievané najmä dojčatá, malé deti, osoby bezmocné alebo necitlivé na teplo, ani zvieratá.

Naše vyhrievacie vankúše z priedušnej mikrovlny sú veľmi prispôsobivé a príjemné pokožke. Môžu byť použité aj bez textilného potahu. Po odpojení spínača sa vyhrievací vankúš môže prať v práčke (pozri údaje o čistení).

Aby ste sa vyvarovali znečisteniu alebo poškodeniu vyhrievacej podušky, odporúčame Vám, používať ju s textilným potahom, zvlášť pri používaní éterických olejov a masť.

Pri prvom použití môže vyhrievacia poduška cítiť umelou hmotou, tento pach sa ale po krátkom čase stratí.


4. Obsluhovanie

4.1 Bezpečnosť

Táto vyhrievacia poduška je vybavená BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Elektronická senzorová technika zabraňuje prehriatiu vyhrievacej podušky na jej celej ploche automatickým vypnutím v prípade poruchy. Ak sa v prípade poruchy vyhrievacia poduška automaticky vypne pomocou bezpečnostného systému, tak už nesvieti signálna žiarovka ani keď je vyhrievacia poduška zapnutá. Dbajte na to, aby sa v prípade poruchy z bezpečnostného dôvodu vyhrievacia poduška už nepoužívala, musí sa zaslať na uvedenú adresu servisu.

4.2 Uvedenie do prevádzky

Najprv skontrolujte, či je prepínač s vyhrievacím vankúšom spojený cez zásuvnú spojku. Potom zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky. Elektrickú podušku zapnite posuvným spínačom (2) na pravej strane (pozri obr. rVypínač).

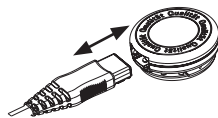

4.3 Voľba teploty

Najrýchlejšie zohriatie elektrickej podušky dosiahnete tak, že ju najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň. V prípade potreby je možné ju neskôr nastaviť na nižší stupeň.

Pre zvýšenie teploty stlačte Δ – tlačidlo (4). Pre zníženie teploty stlačte ∇ – tlačidlo (4).

Pri dlhšom používaní elektrickej podušky odporúčame nastaviť najnižší teplotný stupeň.

4.4 Stupne teploty

Stupeň:	0	vyp
	1	minimálne teplo
	2-5	individuálne teplo
	6	maximálne teplo

4.5 Automatické vypnutie

Táto elektrická poduška je vybavená automatickým vypínaním. Toto zastaví tvorbu tepla cca 90 minút po uvedení elektrickej podušky do prevádzky. Následne začne blikať polovica indikátora teplotných stupňov. Aby bolo možné opätovne uviesť elektrickú podušku do prevádzky, je potrebné posuvný spínač (2) najskôr vypnúť



(poloha „0“). Po približne 5 sekundách je možné podušku opäť zapnúť. V prípade, že sa elektrická poduška po načasovanom vypnutí ďalej nepoužíva, je potrebné ju vypnúť (posuvný spínač - stupeň „0“) a vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.



4.6 Rýchloohrev


Tieto vyhrievacie vankúše disponujú rýchloohrevom, ktorý slúži k rýchlemu nahriatiu počas prvých 10 minút.

4.7 Dodatočné pokyny HK 58 Cosy

Zvláštna forma vyhrievacieho vankúša bola vyvinutá špeciálne pre použitie v oblasti chrbta a šije. Vyhrievací vankúš umiestnite na chrbát tak, aby sa suchý zips krčnej časti nachádzal v oblasti krku.

Potom najprv zatvorte suchý zips. Potom si individuálne prispôsobte dĺžku brušného pásu a spojte spolu oba konce zástrčkového spojenia, aby ste ho pripojili.

Na otvorenie zástrčkového spojenia stlačte súčasne odistenia, ako je zobrazené vedľa.

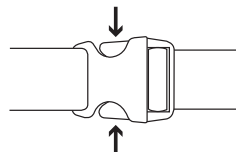

5. Čistenie a údržba

Pred čistením vyhrievacej podušky, vždy vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.

Textilný potah sa môže čistiť podľa symbolov čistenia na etikete.

Menšie škvrny na vyhrievacom vankúši môžete odstrániť kúskom textilu alebo vlhkou špongiou, príp. aj jemným tekutým pracím prostriedkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Nečistite vyhrievací vankúš chemicky, nežmýkajte ho, nesusťe v sušičke, nemangľujte ho ani nežehlíte.

Odpojte pred práním najprv zásuvnú spojku a tým spínač od vyhrievacieho vankúša (pozri obrázok). Nastavte práčku na šetrné pranie pri 30°C.

Z ekologických dôvodov Vám odporúčame prať vyhrievací vankúš len spolu s inými textíliami. Používajte jemný prací prostriedok a dávajte ho podľa údajov výrobcu.

Uvedomte si, že príliš častým práním je vyhrievací vankúš viac namáhaný. Vyhrievací vankúš by sa mal preto prať v práčke počas celej životnosti max. 10 krát.

Vyhrievací vankúš nepripínajte pri sušení kolíkmi na bielizeň alebo podobnými svorkami a v žiadnom prípade nezapínajte vyhrievací vankúš na sušenie!

Spínač s vyhrievacím vankúšom znovu spojte až vtedy, keď bude zásuvná spojka a vyhrievací vankúš úplne suchý.

6. Skladovanie

Keď dlhší čas vyhrievaciu podušku nepoužívate, odporúčame ju skladovať v originálnom obale v suchom prostredí a nezaťaženú. Počas skladovania na vyhrievanú podušku nekladte žiadne predmety, aby ste predišli jej ostrému zlomeniu.

Elektrickú podušku nechajte najprv vychladnúť.

7. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.



