

beurer

UB 64

SK



**(SK) Elektrická napínacia vyhrievacia
podložka**
Návod na obsluhu



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



Vysvetlenie symbolov na štítku



A se citi instrucțiunile!



Nepoužívajte poskladané alebo zhrnuté!



Nevpichujte ihly!



Textílie použité na tomto zariadení
splňajú vysoké požiadavky humánnej
ekológie normy Öko-Tex, ako potvrdil
Forschungsinstitut Hohenstein.

Vážená zákazníčka, Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.

Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje.

So srdečným pozdravom,
Váš tím Beurer

Rozsah dodávky: 1 elektrická vyhrievacia podložka, 1 spínač, 1 návod na používanie

1. Dôležité bezpečnostné upozornenia – dôkladne si ich prečítajte a uschovajte na neskoršie

Nerešpektovanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť škody na zdraví osôb alebo vecné škody (zásah elektrickým prúdom, popálenie pokožky, požiar). Nasledujúce bezpečnostné pokyny a upozornenia na nebezpečenstvo slúžia nielen na ochranu vášho zdravia príp. zdravia tretích osôb, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a tento návod odovzdajte po postúpení výrobku.

- Používajte ohrievaciu podložku len na účely uvedené v tomto návode na používanie.
- Táto ohrievacia podložka nie je určená na použitie v nemocniciach.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, s výnimkou prípadu, ak prístroj používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nepoužívať najmä pri bezvládných osobách, malých deťoch alebo osobách necitlivých na teplo (napr. diabetici, osoby s chorobne podmienenými zmenami kože alebo zjazvenými oblasťami kože v oblasti aplikácie, po užití liekov na utíšenie bolesti alebo alkoholu).
- Magnetické polia vychádzajúce z tohto elektrického výrobku môžu za určitých okolností rušiť funkciu vášho kardiostimulátora. Tieto však ležia hlboko pod medznými hodnotami: intenzita elektrického poľa: max. 5000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, magnetická indukcia: max. 0,1 mT. Pred použitím toho výrobku sa preto poraďte s vašim lekárom a výrobcou vášho kardiostimulátora.
- Pred každým použitím skontrolujte, či ohrievacia podložka leží úplne rozprestretá na matraci.
- Ohrievaciu podložku
 - pripájajte len na napätie uvedené na zariadení;
 - nezapínajte v poskladanom alebo zhrnutom stave;
 - v posteli nezahŕňajte ani nezakladajte pod matrac;
 - neprivierajte (najmä u prestaviteľných postelí alebo delených matrakov);

- nezalamujte;
- nepoužívajte pre zvieratá;
- nepoužívajte vo vlhkom stave.
- Pokiaľ je ohrievacia podložka zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať
 - nijaké predmety (napr. kufror alebo kôš na bielizeň);
 - zdroje tepla ako termofor, elektrická poduška alebo podobne;
 - spínač sa nesmie zakrývať dekou, vankúšom alebo pod. a ani ležať na ohrievacej podložke.
- Neťahajte za elektrické vodiče, ani ich neskrúcajte alebo nezalamujte.
- Nevpichujte do ohrievacej podložky ihly alebo iné ostré predmety.
- Táto elektrická vyhrievacia podložka sa môže používať len v kombinácii s typom spínača, ktorý je špecifikovaný na podložke (štítku).
- Túto ohrievacu podložku nesmú používať deti, ibaže bol rodičmi alebo dohliadajúcou osobou spínač prednastavený alebo dieťa dostatočne oboznámené s bezpečnou prevádzkou ohrievacej podložky.
- Dohliadajte na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
- Ohrievacu podložku je potrebné pravidelne kontrolovať, či nevykazuje príznaky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa objavia takéto príznaky alebo ak bolo zariadenie neodborne použité, musí sa pred opätovným použitím nechať skontrolovať u výrobcu alebo predajcu.
- V prípade, že je poškodené elektrické prívodné vedenie tejto vyhrievacej podložky, musí ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohrozeniu.
- Opravy môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby alebo výrobcom autorizovaný servis, nakoľko si vyžadujú použitie špeciálneho náradia. V dôsledku neodbornej opravy môžu pre užívateľa vzniknúť značné riziká.
- V prípade, že budete mať v súvislosti s používaním našich zariadení nejaké otázky, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo sa informujte na adrese www.beurer.de.

2. Použitie

Táto ohrievacia podložka je určená na ohrievanie postelí. Ohrievacia podložka sa najlepšie ohreje vtedy, ak sa pri zapnutí prikryje posteľnou prikrývkou. Doba predhrievania v zakrytom stave predstavuje cca 30 minút. Ohrievacu podložku môžete používať z oboch strán.

3. Obsluhovanie

3.1 Bezpečnosť

Ohrievacia podložka je vybavená bezpečnostným systémom BEURER (BSS). Táto elektronická snímačová technika zamedzuje prehriatiu ohrievacej podložky na celej jej ploche tým, že ju v prípade poruchy automaticky vypne. Ak z dôvodu výskytu poruchy dôjde k automatickému vypnutiu ohrievacej podložky prostredníctvom bezpečnostného systému Beurer (BSS), prestane kontrolka svietiť, a to aj vtedy, ak je zariadenie zapnuté. Dbajte, prosím, na to, že ohrievacu podložku po výskyte poruchy nie je možné ďalej používať a je potrebné ju zaslať na uvedenú adresu do servisu.

3.2 Uvedenie vyhrievacej podložky do prevádzky

Položte elektrickú vyhrievaciu podložku plocho rozprestretú na váš matrac tak, aby sa vstup kábla nachádzal približne vo výške pliec (pozri obrázok). Hlavová časť nie je vyhrievaná.

Následne natiahnite bočnú časť ako napínaciu plachtu cez boky vášho matraca. Podložka je koncipovaná tak, aby sa hodila na matrace o veľkosti 90x200 cm ako aj 100x200 cm.

Potom upevnite zaužívaným spôsobom vašu napínaciu plachtu tak, aby sa elektrická vyhrievacia podložka nachádzala medzi matracom a napínacou plachtou. Dbajte na to, aby bola elektrická vyhrievacia podložka vždy plocho rozprestretá a aby sa počas používania nezhrňala alebo aby sa na nej nevytvárali záhyby. Kontrolujte pri ustiľaní jej polohu – elektrická vyhrievacia podložka sa môže zapnúť len vtedy, ak je plocho rozprestretá.



Spodná časť sa prostredníctvom zástrčkového spojenia spojí so spínačom.

Na spojenie zastrčte obidva konce zástrčkového spojenia úplne do seba, až zaskočia obidva zaskakovacie háčiky.

Stlačte súčasne na zaskakovacie háčiky a vytiahnite pritom obidve časti zástrčkového spojenia zo seba, aby ste odpojili spínač od spodnej časti (pozri obrázok).

Elektrickú vyhrievaciu podložku odporúčame zapnúť cca 30 minút pred uložením sa do postele a prikryť ju perinou, aby sa zamedzilo úniku tepla.

Pozor: Elektronické dielce v spínači spôsobujú pri používaní ohrievacej podložky ľahké ohriatie spínača. Spínač nesmie preto nikdy ležať na ohrievacej podložke alebo byť prikrytý dekou, vankúšom alebo pod.

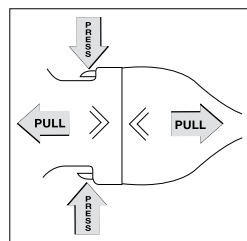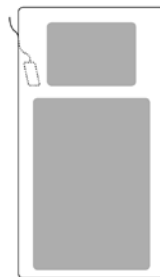

3.3 Voľba teploty

K uvedeniu prístroja do prevádzky najprv spojte vypínač s vyhrievacím telesom tým, že spojíte zásuvnú spojku. Potom zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky.

Najrýchlejšie ohriatie ohrievacej podložky dosiahnete tým, že ju najprv nastavíte na najvyšší teplotný stupeň. Ak chcete podložku používať po dobu niekoľkých hodín, odporúčame následne zvoliť najnižší teplotný stupeň.

3.4 Teplotné stupne

0 = vypnuté

1 = minimálne teplo

2 = stredné teplo

3 = maximálne teplo

3.5 Automatické vypnutie

Pri tejto elektrickej vyhrievacej podložke dochádza k automatickému vypnutiu cca po 3 hodinách. Pokiaľ sa elektrická vyhrievacia podložka ohrieva, svieti červená kontrolka na prepínači. Po uplynutí doby vypnutia sa elektrická ohrievacia podložka prestane ohrievať a červená kontrolka sa rozblíka. Ak chcete elektrickú vyhrievaciu podložku opäť nechať ohrievať, dajte prepínač najprv po dobu cca 5 sekúnd do polohy „0“ (vypnuté) a následne si zvolte požadovaný teplotný stupeň. Ak nechcete elektrickú vyhrievaciu podložku po načasovanom vypnutí ďalej používať, vypnite ju (stupeň „0“) alebo vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.

4. Čistenie a ošetrovanie

Pred čistením ohrievacej podložky vždy najprv vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Na odstránenie menších škvŕn je možné použiť handričku alebo navlhčenú hubku a prípadne menšie množstvo tekutého jemného pracieho prostriedku. Dbajte na to, že ohrievacia podložka sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, strojovo sušiť, manglovať alebo žehliť. V žiadnom prípade nezapínajte ohrievaciu podložku za účelom usušenia. Ohrievaciu podložku pri sušení neprichytávajte kolíkmi na bielizeň alebo pod.

4.1 Čistenie a ošetrovanie ohrievacích podložiek so snímateľným spínačom

Tieto ohrievacie podložky je možné prať v práčke. Pred práním odpojte zástrčkové spojenie a tým aj spínač od ohrievacej podložky (pozri obrázok 3.2).

Nastavte práčku na šetrný prací program pri 30 °C. Použite jemný prací prostriedok a nadávajte ho podľa odporúčania výrobcu. Vezmite do úvahy, že ohrievacia podložka sa príliš častým práním namáha. Z tohto dôvodu by sa mala ohrievacia podložka prať v práčke max. 5 x počas celej životnosti.

Spínač pripojte k ohrievacej podložke až vtedy, ak je zástrčkové spojenie a ohrievacia podložka úplne suchá.

5. Uchovávanie

Ak ohrievaciu podložku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju uchovávať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zaťaženia.

Predtým dajte ochladiť zahrievaný podstavec.

6. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.



